

manual online: KipKep B.V.
Balsemenstraat 4
5644LG Eindhoven, The Netherlands
WWW.KIPKEP.COM | info@kipkep.com

IFU version: KL03025-6

NO - NORSK

Bruksanvisning LEXIE varmepute • Bruk av Lexie:

- Varm/kald pute for kroppen.
- Varm bruk: Lindrer og reduserer smerter i mageområdet under menstruasjon.
- Nakke- og skulderpute.
- Lindrer smerter i korsryggen.
- Avslapning: Varmen og vekten virker beroligende.
- Under graviditet: som varmepute for lindring av ligamentsmerter og korsryggsmerter (LBP).
- Også egnet for å roe ømme muskler.
- Ideell som kald kompress ved muskelsmerter, hevelser, insektbitt, solbrennhet, hodepine, feber, sommervarme og hetsokter.
- Som varmepute: gir behagelig varme som lindrer spenningen, stress og smerte.
- Egnet for et bredt spekter av bruksområder og former seg godt etter nakke, skuldre, rygg, hode, føtter og mage.
- Lexie er helt fri for duftstoffer.

⚠ ADVARSEL:

Les alltid disse instruksjonene nøye før bruk, og oppbevar dem på et trygt sted. Les alltid bruksanvisningen før bruk.

- Bruk alltid puten med originalt trekk.
- Puten må ikke brukes av personer som er overfølsomme for varme, har nedsatt følelse, eller av andre sårbare personer som ikke kan reagere på overoppheting.
- Utsatt for høy varme fra andre varmekilder kan skade puten. Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
-  Ikke la puten bli våt! Dersom den blir våt, kan den ikke brukes igjen.
-  For lengst mulig levetid er det viktig å stille inn mikrobølgeovnen riktig ved oppvarming.
-  Ikke anbefalt for barn under 4 år eller personer med medisinske tilstander, som er funksjonshemmede, sover eller er ufølsomme for varme (de som ikke reagerer på overoppheting).
-  Bruk alltid under tilsyn.
-  Bruk ikke på personer som sover.
- Puten skal kun brukes på tildekket hud.
- Dette er IKKE et leketøy. Foreldres tilsyn anbefales.
- Varm helst puten i mikrobølgeovn. Oppvarming i vanlig stekeovn er vanskeligere å kontrollere.
- Ikke la puten komme i kontakt med metall under oppvarming. For eksempel grillristen, veggen eller bunnen av mikrobølgeovnen. Dette kan skade puten.
- Sjekk alltid putens temperatur på innsiden av håndledet før bruk.
- Unngå bruk på sensitiv hud.
- Bruk ikke puten ved tegn til hudirritasjon.
- Bruk ikke puten hvis det er symptomer på betennelse.
- Selve puten er IKKE vaskbar. Kun trekket kan vaskes, opptil 40°C.
- Bruk ikke puten dersom den er slitt eller har vært overopphettet (linførene er svidd, avgir vond lukt, eller stoffet har fått merker/hull). Bomulststoffet vil bli påvirket og uopprettelig skade hvis polstringen blir for varm og frøene holder på for mye varme. Dette kan vanligvis sees av de brune flekkene og små hullene som oppstår i stoffet. Da er puten ubrukelig. Dessuten er den brennte lukten ubehagelig.
- Obs:** La aldri puten være uten tilsyn under oppvarming i oven eller mikrobølgeovn. Det er fare for brann hvis oppvarmingsprosessen ikke utføres riktig.
- KipKep kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av feil bruk av Lexie eller ved at instruksjonene for bruk av puten ikke følges.
- Åburlige hendelser ved bruk skal rapporteres til produsenten (KipKep B.V.) og relevante myndigheter i brukers land.
- Følg alltid mikrobølgeovns bruksmanual, og kontroller effekten (wattstyrken) for valgt innstilling.
- Sammensetning: Fyll: Infirø | Pute: 100 % bomull | Trekk: varierer, se trekkets etikett. Bruk alltid puten med det originale KipKep-trekket.
- Sjekk jevnlig at puten ikke er skadet eller slitt. Hvis det er tegn på at puten har blitt brukt feil eller ikke fungerer, må du kontakte leverandøren før du bruker den igjen.

Bruksanvisning for KipKep Lexie varmepute

Kan brukes både som varmepute og kald kompress.

Lexies form gjør den ideell for mage, korsrygg og nakke. Vekten foredeles over puten.

-  Puten skal kjønes lunken, aldri varm.
- Fjern alltid grillristen fra mikrobølgeovnen! Sørg for at puten ikke kommer i kontakt med metall under oppvarming!
- Ikke overskrid anbefalt oppvarmingstid, og varm ikke opp igjen før puten har kjølt ned til romtemperatur.
- Plasser puten på den roterende glassplaten. Helst på en ren, mikrobølgeisikker (keramisk eller glass) tallerken. Les alltid brukerhåndboken til mikrobølgeovnen.
- Sørg for at mikrobølgeovnen er fri for matrester. Matrester blir veldig varme når de varmes opp, og kan forårsake svimerker i stoffet på puten.
- La puten avkjøles i 1 minutt før du legger den på noens kropp. Etter et minutt, sjekk alltid temperaturen på innsiden av håndledet eller i armkroken (maks. 45°C).
- Varm alltid opp puten uten trekket.
- Bruk alltid puten i trekket. Plasser den varme eller avkjølte puten i trekket.
- Bruk aldri puten direkte på bar hud.
- Vask trekket før første bruk. Det ytre trekket kan vaskes på opptil 40°C grader.
- Puten holder seg behagelig varm i opptil en halvtime og kan varmes opp igjen. La puten avkjøles helt mellom hver bruk.

Oppvarming:

- (Fig. 1) Fjern puten fra trekket.
- Fjern grillristen før oppvarming og sørg for at puten ligger på en ren, ikke-metallisk overflate.
- Plasser den aldri på en metalloverflate, og sørg for at den ikke kan bære mikrobølgeovns vegger under oppvarming. Plasser puten forsiktig, brettet, i mikrobølgeovnen slik at den ikke hindrer rotasjonsplaten.
- Brett puten i to, fordel frøene jevnt. Dersom mikrobølgeovnen ikke har en roterende glassplate, plasser du puten på en mikrobølgeovnsikker tallerken/bolle og roterer den halveis i oppvarmingstiden for å sikre at produktet varmes opp jevnt. Rist puten frem og tilbake en gang i blant.
- Sørg for at grille- eller brunningsfunksjoner (hvis tilgjengelig på mikrobølgeovnen) er slått av.
- (Fig. 1) Varm puten uten trekk i mikrobølgeovn ved 600 watt i 60–90 sekunder. Øk eventuelt tiden med 15 sekunder til ønsket temperatur er oppnådd. Ikke varm puten lenger enn 2 minutter totalt!
- La aldri puten være uten tilsyn under oppvarming.
- Ta puten forsiktig ut av mikrobølgeovnen for å ikke brenne deg.
- En mikrobølgeovn fungerer ved å spre varme sakte fra innsiden til utsiden. Dette betyr at det vil ta noe tid før puten føles varm etter at den er tatt ut av mikrobølgeovnen.
- STEKEOVN:** Forvarm ovnen til 75 °C. Legg puten uten trekk i en ren, ildfast form. Varm i to minutter, rist frem og tilbake og kjenn om den er varm nok. Varm opp i et minutt til om nødvendig. Håndvarm temperatur er tilstrekkelig.
- (Fig. 3) Puten skal føles lunken, og ikke for varm til å berøres. Overoppheting kan forårsake brann eller svie, og kan skade puten og omgivelsene.
- (Fig. 2) Vent 1 minutt etter at du har varmet puten opp, og sjekk temperaturen på den for å se om den er tilstrekkelig avkjølt før bruk.
- Sjekk temperaturen som beskrevet ovenfor.
- (Fig. 2) Legg puten tilbake i trekket.
- Ikke la puten stå for lenge i mikrobølgeovnen for å unngå overoppheting!
- Bruk alltid under tilsyn.

Nedkjøling:

- Når den brukes som kald kompress.
- Avkjøl puten med trekk i en ren frysepose i kjøleskapet eller fryseren.
- La den ligge i fryseren i minst 1 time.
- Når puten skal kjøles ned, bør den alltid legges i en ren frysepose eller beholder for å unngå kontakt med mat og/eller is.

Oppbevaring:

- Oppbevar Lexie på et tørt og kjølig sted når den ikke er i bruk.
- La puten kjøle seg helt ned før du setter den bort.
- Må ikke oppbevares i direkte sollys.

CE MD CCE-mærking: Dette produktet oppfyller kravene og andre relevante bestemmelser i de gjeldende europeiske CE-direktivene, medisinsk utstyr, klasse 1

Garanti:

Gjeldene nasjonal lovgivning for garanti gjelder for ditt kjøp. KipKep B.V. kan ikke godta noen garantikrav i følgende tilfeller: skader eller defekter forårsaket av bruk, drift eller håndtering av produktet på måter som ikke er forenlig med normal personlig eller husholdningsbruk; og heller ikke (forsøk på) reparasjoner utført av en annen part enn KipKep B.V. **VIKTIGT:** Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den ansvarlige parten for håndteringen av disse, kan medføre tap av brukers rett til å benytte produktet.

SV - SVENSKA

IFU – LEXIE värmedyna Användarhandbok • Användning av Lexie:

- Värme-/kyldyna för kroppen.
- Värme: lugnande och smärtlindrande i bukområdet under menstruation.
- Nack- och axelomslag.
- Smärtlindring för ländryggssmärtor.
- Avslappning: värmen och vikten hjälper dig att slappna av.
- Under graviditet: Som värmedyna för lindring av ledvärk och ländryggssmärtor (LBP).
- Även utmärkt för att lindra värkande muskler.
- Idealsk som kylkompress för muskelsmärk, svullnad, insektsbett, solbränna, huvudvärk, feber, sommarhetta och värmeallergier.
- Som värmedyna: Ger lugnande värme som lindrar spänningar, stress och smärter.
- Den är lämplig för en mängd olika användningsområden och anpassar sig väl till nacke, axlar, rygg, huvud, fötter och mage.
- Lexie är luktfri.

⚠ VARNING:

Följ alltid dessa instruktioner och förvara dem på en säker plats. Läs alltid instruktionerna före användning.

- Använd alltid med det ursprungliga överdraget.
- Dynan bör inte användas av personer som är överkänsliga eller okänsliga för värme, samt andra mycket sårbara personer som inte kan reagera på överhettning.
- Utsätt inte dynan för överdriven värme från andra värmekällor. Produkten är avsedd för inomhusbruk.
-  Se till att den inte blir blöt! Om dynan har blivit blöt kan den inte längre användas.
-  För att säkerställa lång livslängd är det mycket viktigt att mikrovågsgugnen ställs in korrekt vid uppvärmning.
-  Rekommenderas inte för barn under 4 år eller för användning på personer med medicinska tillstånd, funktionsnedsättningar, som sover eller är okänsliga för värme (de som inte kan reagera på överhettning).
-  Använd alltid under uppsikt.
- Använd inte på personer som sover.
- Dynan ska endast användas på en täckt del av kroppen.
- Den är INTE en leksak. Föräldratillsyn rekommenderas.
- Värm gärna dynan i mikrovågsgugn. Uppvärmning i vanlig ugn eller varmluftsgn är svårare att kontrollera.
- Låt inte dynan komma i kontakt med metall medan den värms upp. Till exempel vidröra gallret, väggen eller botten av mikrovågsgugnen. Detta skadar dynan.
- Kontrollera alltid dynans temperatur på insidan av handleden innan användning.
- Undvik kontakt med känslig hud.
- Använd inte vid tecken på hudirritation.
- Använd inte vid symptom på inflammation.
- Själva dynan är INTE tvättbar. Överdraget är däremot tvättbart i 40 grader.
- Använd inte dynan om den är sliten eller har överhettats (fröna blir brända och avger en obehaglig bakningsdoft, eller överdraget visar brännmärken). Bomulstygget påverkas och skadas oåterkalleligt om fyllningen blir för varm och fröna behåller för mycket värme. Detta syns oftast genom bruna fläckar och små hål som uppstår i tyget. Dynan är då obrukbar. Dessutom är den brända lukten också obehaglig.
- Varning: Lämna aldrig dynan utan uppsikt medan den värms i ugn eller mikrovågsgugn. Det finns risk för brand om uppvärmningsprocessen inte utförs korrekt.
- KipKep kan inte hållas ansvarig för skador som orsakas av felaktig användning av Lexie eller underlåtenhet att följa instruktionerna för användning av kudden.
- Alla allvariga incidenter som inträffar vid användning av dynan bör rapporteras till tillverkaren (KipKep B.V.) och den behöriga myndigheten i det land där användaren/patienten står under användning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för mikrovågsgugnen för att vara säker på effektivtjän för varje inställning på din mikrovågsgugn.
- Sammansättning. Fyllning: Infirø | Dyna: 100% bomull | Överdrag: varierar, se etikett på överdrag. Använd alltid dynan med det ursprungliga KipKep-överdraget.
- Kontrollera dynan regelbundet för tecken på slitage eller skador. Om du finns tecken på att dynan har använts felaktigt eller inte fungerar som den ska, kontakta leverantören innan du använder den igen.

Bruksanvisning för KipKep Lexie värmedyna

Att användas som värmedyna och kylkompress.

Lexies form gör den idealisk för användning på magen, ländryggen och nacken. Vikten är jämnt fördelad över dynan.

- Dynan ska kännas ljummen, inte varm.
- Ta alltid bort gallret från din mikrovågsgugn! Se till att kudden inte kommer i kontakt med metall under uppvärmning!
- Överskrid inte den rekommenderade uppvärmningstiden och varm endast upp dynan igen när den har svalnat till rumtemperatur.
- Värm alltid dynan på den roterande glasskivan. Helst på en ren mikrovågssäker (keramisk eller glas) tallrik.
- Konsultera alltid bruksanvisningen för din mikrovågsgugn.
- Se till att din mikrovågsgugn är fri från matrester. Matrester blir mycket varma vid uppvärmning och kan orsaka brännmärken på dynans överdragstyg.
- Låt dynan svalna i 1 minut innan den placeras på någons kropp. Efter en minut, kontrollera alltid temperaturen på insidan av handleden eller i armvecket. (max 45°C).
- Värm alltid dynan utan överdrag.
- Värm alltid dynan utan överdrag. Placera den uppvärmda eller kylda dynan i överdraget.
- Använd aldrig dynan direkt mot bar hud.
- Tvätta överdraget före första användning. För rengöring, tvätta det yttre överdraget i 40° grader celcius.
- Dynan håller sig behagligt varm i upp till en halvtimme och kan värmas upp igen. Låt dynan svalna helt mellan användningar.

Uppvärmning:

- (Fig.1) Ta ut dynan ur överdraget.
- Ta alltid bort gallret från mikrovågsgugnen innan du värmer dynan och se till att dynan ligger på en ren yta.
- Lägg den aldrig på en metallskiva och se till att den inte kan vidröra väggarna under uppvärmning. Placera försiktigt dynan, vikt, i mikrovågsgugnen och se till att inget hindrar tallrikens rörelse.
- Vik dynan på mitten och fördela fröna jämnt. Om din mikrovågsgugn inte har en roterande glasskiva, placera dynan på en mikrovågssäker tallrik eller skål och rotera den halvägs genom uppvärmningstiden för att säkerställa att produkten värms upp jämnt. Skaka dynan fram och tillbaka en gång under uppvärmningen.
- Se till att funktioner som grill eller bryning (om sådana finns på mikrovågsgugnen) är avstängda.
- (Fig. 1) Värm dynan utan överdrag i mikrovågsgugn i 60-90 sekunder på 600 watt. Vid behov, öka tiden med 15 sekunder tills önskad temperatur uppnåtts. Värm aldrig dynan i mer än 2 minuter!
- Lämna inte dynan utan uppsikt medan den värms upp.
- Ta försiktigt ut dynan ur mikrovågsgugnen för att undvika att bränna dig.
- En mikrovågsgugn fungerar genom att långsamt fördela värmen från insidan till utsidan. Det betyder att det tar en stund innan dynan känns varm efter att den tagits ut ur mikrovågsgugnen.
- UGN:** Förvarm ugnen till 75 grader och placera värmedynan utan överdrag i en ren ugnssäker form. Värm i två minuter, skaka dynan fram och tillbaka och känn efter om den är tillräckligt varm. Vid behov, varm ytterligare en minut. Fingervarmt är tillräckligt varmt.
- (Fig. 3) Dynan ska kännas ljummen, inte varm, och aldrig för varm för att vidröras. Överhettning kan orsaka brand eller brännmärken och kan skada dynan och omgivningen.
- (Fig. 2) Vänta 1 minut efter uppvärmning och kontrollera dynan om den har svalnat tillräckligt innan användning.
- Kontrollera alltid temperaturen enligt beskrivningen ovan.
- (Fig. 2) Sätt tillbaka dynan i överdraget.
- Lämna inte dynan i mikrovågsgugnen för länge för att undvika överhettning!
- Använd alltid under uppsikt.

Kylning:

- Vid användning som kylkompress.
- Kyl dynan med överdraget i en ren fryspåse i kylskåp eller frys.
- Lägg dynan i frysen i minst 1 timme.
- När dynan förvaras i kylskåp, placera den alltid i en ren fryspåse eller behållare för att undvika kontakt med mat och/eller is.

Förvaring:

- När Lexie inte används, förvara den på en torr och sval plats.
- Om du förvarar dynan, låt den svalna helt innan den läggs undan.
- Förvara inte i direkt solljus.

CE MD CCE-märkning: Denna produkt uppfyller kraven och andra relevanta bestämmelser enligt gällande europeiska CE-direktiv för medicintekniska produkter, klass 1

Garanti:

Den lokala och tillämpliga lagstiftningen som reglerar garantin gäller för ditt köp. KipKep B.V. kan inte godta några garantianspråk i följande fall: Skador eller defekter som orsakas av användning, hantering eller bruk av produkten på sätt som inte är förenliga med normal personligt eller hushållsbruk; samt (forsök till) reparationer utförda av annan än KipKep B.V.

VIKTIGT: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkännts av den ansvariga parten för hanteringen kan leda till att användarens rätt att använda produkten upphör.

DA - DANSK

IFU – LEXIE varmepute brugsanvisning Brugen af Lexie:

- Varm/kold pude til kroppen.
- Varm: Afslapper og reducerer smerter i maveregionen under menstruation.
- Nakke- og skulderomslag.
- Smertelindring ved lændesmerter.
- Afslapning: Varmen og vægten vil hjælpe dig med at slappe af.
- Under graviditet: Som varmepute til lindring af ledbåndssmerter og lændesmerter (LS).
- Også god til at lindre ømme muskler.
- Ideel som koldt kompres mod muskelsmerter, hævelser, insektbid, solskoldning, hovedpine, feber, sommervarme og hedeture.
- Som varmepute: Giver beroligende varme til at lindre spændinger, stress og smerter.
- Den er velegnet til en bred vifte af anvendelsesområder og former sig godt efter nakke, skuldre, ryg, hoved, fødder og mave.
- Lexie er duft-fri.

⚠ ADVARSEL:

Følg altid disse instruktioner, og opbevar dem et sikkert sted. Læs altid instruktionerne før brug.

- Brug altid med det originale overdrag.
- Puten bør ikke bruges af personer, der er overfølsomme eller ufølsomme over for varme, og andre meget sårbare personer, der ikke er i stand til at reagere på overophedning.
- Udsæt ikke puden for overdreven varme fra andre varmekilder. Produktet er beregnet til indendørs brug.
-  Sørg for, at det ikke bliver vådt! Puden kan ikke længere bruges, hvis den bliver våd.
-  For at sikre en lang levetid er det meget vigtigt at indstille mikrobølgeovnen korrekt, når puden opvarmes.
-  Anbefales ikke til børn under 4 år eller til brug på personer med sygdomme, som er handicappede, som sover eller som er ufølsomme over for varme (personer, der ikke kan reagere på overophedning).
-  Brug altid under opsyn.
- Brug ikke på folk, der sover.
- Puten bør kun bruges på en tildækket del af kroppen.
- Dette er IKKE et legetøj. Forældreopsyn anbefales.
- Varm helst puden op i mikrobølgeovnen. Opvarming i en almindelig ovn eller varmluftovn er vanskeligere at kontrollere.
- Lad ikke puden komme i kontakt med metal, mens den opvarmes. For eksempel berører med risten, væggen eller bunden af mikrobølgeovnen. Dette vil beskadige puden.
- Kontroller altid temperaturen på puden med indersiden af dit håndled før brug.
- Undgå kontakt med følsom hud.
- Må ikke anvendes, hvis der er tegn på hudirritation.
- Må ikke anvendes, hvis der er symptomer på betændelse.
- Selve puden kan IKKE vaskes. Betrækket kan dog vaskes ved op til 40 grader.
- Brug ikke puden, hvis den er slidt eller overophedet (frøene bliver brændte og kan afgive en ubehagelig lugt, eller også puden eller betrækket bliver beskadiget af brændemærker). Bomuldstoffet vil blive påvirket og uopretteligt beskadiget, hvis polstringen bliver for varm, og frøene holder for meget på varmen. Dette kan normalt ses ved, at der opstår brune pletter og små huller i stoffet. I så fald er puden ubrugelig. Desuden lugter den brændt, hvilket er ubehageligt.
- Advarsel: Efterlad aldrig puden uden opsyn, mens den opvarmes i en ovn eller mikrobølgeovn. Der er risiko for brand, hvis opvarmningsprocessen ikke udføres korrekt.
- KipKep kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug af Lexie eller manglende overholdelse af instruktionerne for brug af puden.
- Indrør alvorlig hændelse, der opstår under brug af puden, skal rapporteres til producenten (KipKep B.V.) og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren/patienten er bosiddende.
- Følg altid mikrobølgeovnsproducentens anvisninger for at være sikker på effektivniveauet for hver indstilling på din mikrobølgeovn.
- Sammensætning. Fyld: Høfrø | Pude: 100 % bomuld | Betræk: Varierer, se etiketten på betrækket. Brug altid puden med det originale KipKep-betræk.
- Kontroller puden regelmæssigt for tegn på slid eller skader. Hvis der er tegn på, at puden er blevet brugt forkert eller ikke fungerer, skal du kontakte leverandøren, før du bruger den igen.

Bruksanvisning KipKep Lexie Varmepude

Kan bruges som varmepute og koldt kompres.

Formen på en Lexie gør den ideel til brug på maven, lænden og nakken. Vægten er jævnt fordelt over puden.

-  Puden skal føles lun, aldrig varm.
- Ta altid risten ud af din mikrobølgeovn! Sørg for, at puden ikke kommer i kontakt med metal under opvarming!
- Overskrid ikke den anbefalede opvarmingstid, og opvarm først puden, når den er afkølet til stuetemperatur.
- Opvarm altid puden på den roterende glastallerken. Gerne på en ren mikrobølgeovnsikker tallerken (keramik eller glas). Se altid brugermanualen til din mikrobølgeovn.
- Sørg for, at din mikrobølgeovn er fri for madrester. Madrester bliver meget varme, når de opvarmes, og kan forårsage brændemærker i pudens stof.
- Lad puden køle af i 1 minut, før du placerer den på noens krop. Efter et minut skal du altid kontrollere temperaturen på indersiden af dit håndled eller i armhulnen (maks. 45°C).
- Varm altid puden op uden betræk.
- Brug altid puden med betrækket på. Placer den varme eller afkølede pude i betrækket.
- Brug aldrig puden direkte på huden.
- Vask betrækket før det tages i brug for første gang. Det ydre betræk kan vaskes ved 40°C for at rengøre det.
- Puden holder sig behageligt varm i op til en halv time og kan genopvarmes. Lad puden køle helt af mellem hver anvendelse.

Opvarming:

- (Fig. 1) Fjern puden fra betrækket.
- Tag altid risten ud af mikrobølgeovnen, inden du opvarmer puden, og sørg for, at puden ligger på en ren overflade.
- Læg den aldrig på en metaloverflade, og sørg for, at den ikke kan røre mikrobølgeovns vægge under opvarming. Placer forsigtigt puden, foldet, i mikrobølgeovnen, og sørg for, at intet blokerer tallerkenens bevægelse.
- Læg puden på midten; fordel frøene jævnt. Hvis din mikrobølgeovn ikke har en drejetallerken af glas, skal du placere puden på en mikrobølgeovnsikker tallerken/skål og dreje den halvejs gennem opvarmingstiden for at sikre, at produktet varmes jævnt op. Ryst puden frem og tilbage idet du drejer den.
- Sørg for, at funktioner som grill eller bruning (hvis tilgængelige på mikrobølgeovnen) er slukket.
- (Fig. 1) Varm puden uden betræk i en mikrobølgeovn ved 600 watt i 60-90 sekunder. Om nødvendigt øges tiden med 15 sekunder ad gangen, indtil den ønskede temperatur er nået. Varm aldrig puden op i mere end 2 minutter!
- Efterlad ikke puden uden opsyn, mens den varmes op.
- Vær forsigtig når du tager puden ud af mikrobølgeovnen, så du undgår forbrændinger.
- En mikrobølgeovn fungerer ved langsomt at sprede varme indefra og ud. Det betyder, at det vil tage et stykke tid, før puden føles varm, efter den er taget ud af mikrobølgeovnen.
- OVN:** Forvarm ovnen til 75 grader, og læg varmeputen uden låg i et rent ovnfast fad. Opvarm i to minutter, ryst den frem og tilbage, og mærk, om den er varm nok. Opvarm om nødvendigt i yderligere et minut. Håndvarmt er varmt nok.
- (Fig. 3) Puden skal føles lun, ikke for varm at røre ved. Overophedning kan forårsage brand eller forbrænding og kan beskadige puden og omgivelserne.
- (Fig. 2) Vent 1 minut efter opvarming, og kontroller temperaturen på puden, om den er afkølet tilstrækkeligt, før den tages i brug.
- Kontroller altid temperaturen som beskrevet ovenfor.
- (Fig. 2) Læg puden tilbage i betrækket.
- Lad ikke puden stå for længe i mikrobølgeovnen, da det kan forårsage overophedning!
- Brug altid under opsyn.

Nedkjøling:

- Ved brug som koldt kompres.
- Køl puden med betrækket ned i en ren frysepose i køleskabet eller fryseren.
- Placer puden i fryseren i mindst 1 time.
- Når puden opbevares i køleskabet, skal den altid placeres i en ren frysepose eller beholder for at undgå kontakt med mad og/eller is.

Oppbevaring:


- Når Lexie ikke er i brug, skal den opbevares et tørt og køligt sted.
- Hvis du opbevarer puden, skal du lade den køle helt af, inden du lægger den væk.
- Må ikke opbevares i direkte sollys.

CE MD CCE-mærkning: Dette produkt overholder kravene og andre relevante bestemmelser i de gældende europæiske CE-direktiver, medicinsk udstyr, klasse 1

Garanti:

Den lokale og gældende lovgivning vedrørende garantien gælder for dit køb. KipKep B.V. kan ikke acceptere garantikrav i følgende tilfælde: Skader eller defekter forårsaget af brug; betjening eller håndtering af produktet på måder, der ikke er i overensstemmelse med normal personlig brug eller husholdningsbrug; og heller ikke (forsøg på) reparationer udført af en anden part end KipKep B.V.

VIGTIGT: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part for håndteringen af disse, kan føre til tab af brugerens ret til at bruge dette produkt.

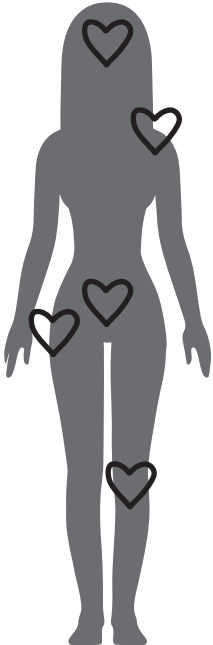

manual online:



MORE INFORMATION:

 KipKep B.V.
Balsemienstraat 4
5644LG Eindhoven, The Netherlands
WWW.KIPKEP.COM | info@kipkep.com



IFU version: KL03025-6